


測定例 辛味成分 (ダイコン等) (e-HPLCことりタイプCで測定)

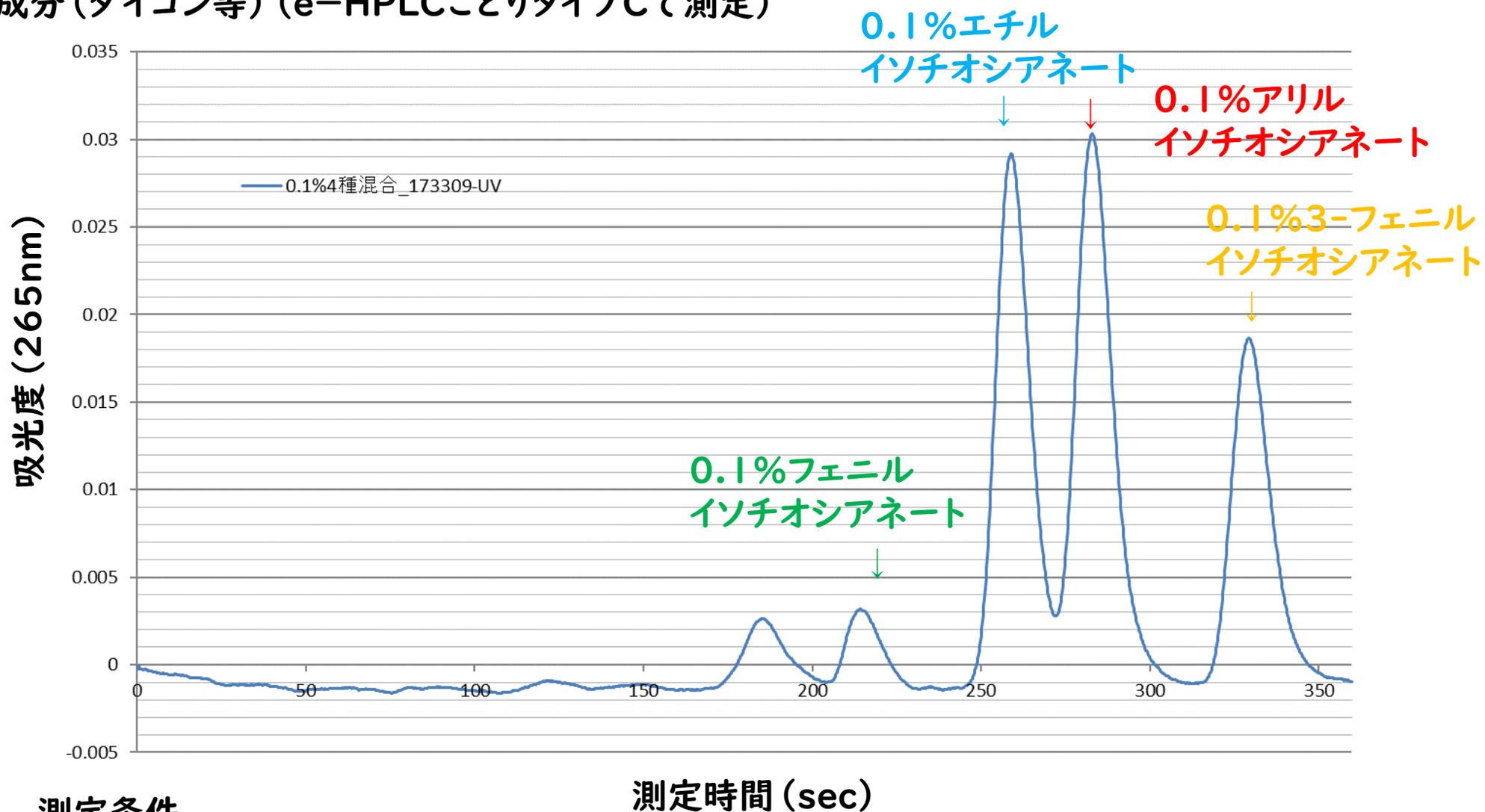

測定条件

流量 0.5ml/min

溶離液 水/アセトニトリル=30%/70%

カラム PEGASIL ODS SP100 Φ6×100mm (株式会社センシュウ科学製)

サンプル量 2.7μL

検出器 265nm

各0.1%のアリルイソチオシアネート・フェニルイソチオシアネート・エチルイソチオシアネート・3-フェニルイソチオシアネートを溶離液にて溶解 検出器 265nm